

Blephaclean

Destinazione d'uso:

DETERSIONE DELLE PALPEBRE

BLEPHACLEAN è per la detersione anche giornaliera delle palpebre specialmente:

- in caso di sensibilità della pelle, palpebre o occhi,
- per rimuovere polvere, polline e secrezioni palpebrali. Può essere utilizzato durante la cura di allergia o infezione agli occhi,
- in caso di infiammazione o infezione delle palpebre come blefariti, disfunzione delle ghiandole di Meibomio, orzaiolo o calazio. Queste condizioni possono causare sintomi dell'occhio secco come prurito, sensazione di sabbia negli occhi, occhi rossi ed affaticati,
- per pulire le palpebre prima di procedure oftalmiche come iniezioni terapeutiche nell'occhio (iniezioni intra vitreali), chirurgia laser oftalmica (LASIK o PRK) e intervento di cataratta. BLEPHACLEAN può essere utilizzato anche dopo intervento, sotto il controllo del medico o dell'oftalmologo.

BLEPHACLEAN mantiene le palpebre pulite rispettando il contorno occhi e la flora batterica presente.

Prima di intervento chirurgico all'occhio, utilizzare due volte al giorno per 5 giorni o secondo le indicazioni del medico o del farmacista.

Negli altri casi, utilizzare due volte al giorno mattino e sera per 3 settimane e successivamente una volta al giorno per 3 mesi o secondo le indicazioni del medico o del farmacista. In condizioni croniche delle palpebre, utilizzare per la detersione continua delle palpebre a lungo termine. Non è necessario sciacquare dopo l'utilizzo.


BLEPHACLEAN può essere usato per bambini al di sopra dei 3 mesi di età.

Per i portatori di lenti a contatto: rimuovere le lenti prima di usare BLEPHACLEAN


Istruzioni per l'uso:

1. Detersione delle palpebre e delle ciglia:
Aprire la bustina e spiegare la garza all'interno. Tenendo l'occhio chiuso, strofinare delicatamente la garza sulle palpebre e alla base delle ciglia.

Massaggiare con cura le palpebre con piccoli movimenti circolari, rimuovendo delicatamente croste, secrezioni o trucco.

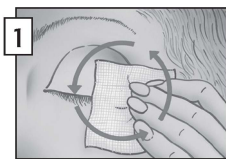

2. Detersione del bordo delle palpebre:
Di fronte a uno specchio, aprire le palpebre con cura esercitando una leggera trazione sulle ciglia. Strofinare con cura il bordo delle palpebre utilizzando una garza arrotolata.

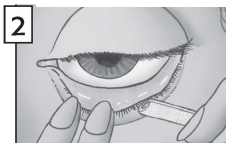

Ripetere sull'altro occhio, utilizzando una nuova garza.

Precauzioni per l'uso e avvertenze:

Utilizzare solo sulla pelle, non inserire direttamente nell'occhio.

Non utilizzare se allergico a qualsiasi ingrediente.

BLEPHACLEAN è un prodotto sterile, **solo monouso**.

Non riutilizzare, in questo modo la garza funziona meno bene e può aumentare il rischio di infezioni.

Non usare la garza se la bustina è aperta o danneggiata.

Il colore della garza (lozione) può variare.

Questo è dovuto alla presenza di estratti di piante ed è normale.

Interrompere l'uso di Blephaclean e contattare il medico se i sintomi peggiorano.

Non usare dopo la data di scadenza chiaramente indicata sulla confezione esterna e sulla bustina. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato.

Gettare le garze dopo l'uso nei rifiuti domestici.

Conservare tra 8 e 25 °C.

TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Possibili effetti collaterali:

I seguenti casi sono stati riportati con Blephaclean: bruciore o sensazione di pizzicore per alcuni minuti dopo l'uso, arrossamento o gonfiore delle palpebre, reazioni allergiche.

Descrizione del prodotto:

Garza sterile, imbevuta di una lozione.

La lozione contiene: caprioloil glicina, sodio ialuronato, PEG 8, polossamero 184, polisorbato 20, estratto di Centella asiatica in glicole propilenico (glicole propilenico, estratto di Centella asiatica e acqua), complesso per la regolazione del sebo senza conservante (glicole propilenico, estratto di radice di Iris, zinco solfato, PPG-5 cetet 20 e retinil palmitato (Vitamina A), alcool e acqua), PEG 6 caprilico/caprinico gliceridi (per esempio macrogol 6 glicerolo caprilcaprinato), dipotassio fosfato, sodio idrossido, potassio diidrogeno fosfato, acqua depurata.